

Elektrostimulátor TEN EMS

Vlastnosti:

Můžete si vybrat jakýkoli z režimů ošetření (Rameno/pas/klobouk/ruce a chodidla/noha)

Produkt je speciálně navržen pro zmírnění bolesti svalů. Přístroj může mít léčebný účinek zejména u pacientů trpících bolestmi šíje, zad, beder a různých kloubů. Exkluzivně navržený program navozuje pocit ruční masáže. Měkký a jemný pulz může zlepšit krevní oběh a poskytnout zvláštní účinek na uvolnění únavy. Použijte pulzní masážní přístroj pro: Ztuhlost ramen, paralýza periferních nervů, obnova únavy. Zlepšuje krevní oběh a postupné uvolňování svalové bolesti.

(2) Technické údaje:

1. Napětí: 4,5V

2. Jmenovitá pracovní doba: 15min


3. Příslušenství: 1x elektrostimulátor 8x tělesové elektrody 1x napájecí adaptér 230 V AC 1x propojovací kabel pro 4 elektrody 1x propojovací kabel pro 2 elektrody 1x kabel připojující napájení přes USB

Volitelné příslušenství: 2ks magnetických bot/1ks masážní clony

(3) příprava a nastavení elektrod.

1. Správně připojte kabel elektrody k elektrodovým podložkám.
2. Zasuňte zástrčku elektrodového kabelu do elektrodového konektoru jednotky.
3. Sundejte film z elektrod.
4. Navlhčeným ručníkem otřete oblast pokožky, na které chce připevnit elektrody.
5. Pokud jsou elektrodové podložky znečištěné, sníží se jak jejich přilnavost, tak počet možných použití.
6. Přiložte elektrody na oblast těla, kterou chcete masírovat.

Popis tlačítek: Celkem 13 tlačítek

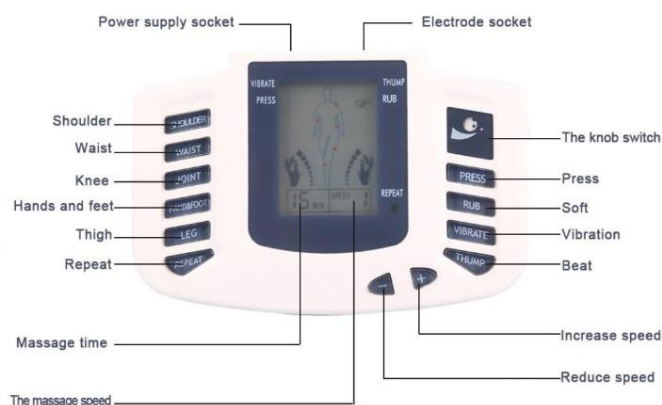

1. Tlačítko "Shoulder": pro masáž ramen a zad. Stiskněte tlačítko rychlosti "+" - "/" pro nastavení intenzity. A rychlost

se automaticky sníží nebo zvýší. Kompletní ošetření trvá 30 minut. Přenosový režim po 5 minutách (PRESS->RUB->VIBRATE->THUMP).

2. Tlačítko "Waist": určeno pro masáž pasu. Stav masáže pasu se zobrazí na obrazovce. A změňte režim po 5 minutách (PRESS->RUB->VIBRATE->THUMP), stiskněte tlačítko rychlosti "+"/"-" pro nastavení intenzity.

3. Tlačítko "Joint": určeno pro masáž kloubů, změna režimu po 5 minutách (PRESS->RUB->VIBRATE->THUMP), Stiskněte tlačítko rychlosti "+"/"_" pro nastavení intenzity

4. Tlačítko „Hand&Foot“ vhodné pro masáž rukou a nohou. Stav masáže rukou a nohou lze měnit po 5 minutách. Celkem 4 režimy (PRESS->RUB->VIBRATE->THUMP)

5. Tlačítko "Leg": nastavení na masáž nohou. Změna režimu masáže každých 5 minut. Stisknutím tlačítka rychlosti upravíte intenzitu. A rychlost se automaticky sníží nebo zvýší.

6. Tlačítko Repeat: Je užitečné pouze ve stavu výše 5 režimů. Stiskněte toto tlačítko pro opakování výše 5 různých funkcí.

7. Doba masáže zobrazená na obrazovce

8. Rychlost masáže zobrazená na obrazovce.

9. Rychlost a intenzita: obě obsahují tlačítko vysoké (+) a nízké (-). Stiskněte + tlačítko pro zvýšení intenzity. Stisknutím tlačítka – snížíte intenzitu.

10. Tlačítko "Thump" Stiskněte pro zahájení masáže „bušením“

11. Tlačítko "Vibrate" Stiskněte pro zahájení vibrační masáže.

12. Tlačítko "RUB": Stiskněte pro zahájení masáže **třením**

13. Tlačítko "Press": Stisknutím zahájíte masáž.

14. ON OFF zapněte tlačítko pro spuštění zařízení, vypněte pro zastavení